

FARO S.p.A. fondée en 1948 par Osvaldo Favonio, conçoit et produit des appareils destinés aux constructeurs d'unités dentaires, aux cabinets dentaires et aux laboratoires de prothèses dentaires. L'usine d'Ornago (MB) s'étend sur plus de 5.000 m2 couverts où elle accueille aussi bien la production que les départements de conception et de recherche & développement.

Au fil des ans, la Société a conquis une position de leader mondial dans le secteur Spécifique de l'éclairage dentaire : un rôle obtenu grâce à l'engagement porté sur la recherche de la technologie et du design et grâce à la capacité de comprendre les réels besoins des utilisateurs finaux.

La qualité est totalement garantie par la gestion interne de tout le cycle de production et par un service avant et après-vente qualifié et efficace. L'expérience FARO exprime au mieux la fierté d'un produit entièrement réalisé en Italie.

Les **six lignes** de produits que nous fabriquons et que nous commercialisons offrent **une gamme complète de solutions** l'aménagement du cabinet médical d'odontologie et du laboratoire.



ÉCLAIRAGE DENTAIRE

inclut différents modèles de lampes, réalisées avec technologie à LED et HALOGÈNE ;



SET D'APPLICATION ET COMPLÈMENTS

indispensables pour le positionnement des lampes et des accessoires relatifs sur l'unité dentaire et à l'intérieur du cabinet ;



STÉRILISATION ET EMBALLAGE

comprend des autoclaves de classe B, distillateurs et thermosoudeuses ;



INSTRUMENTS DE CABINET DENTAIRE

turbines, seringues, contre-angles et pièces à main ;



COMPOSANTS POUR UNITÉ DENTAIRE

une ligne d'accessoires et de pièces de rechange destinée aux unités dentaires ;



INSTRUMENTS DE LABORATOIRE

moteurs et pièces à main;

Nous sommes en outre capables de personnaliser nos produits pour satisfaire des demandes spécifiques. Pour un projet personnalisé, contactez notre Service Clients.



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948

FARO S.p.A.

via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540
www.faro.it - comm.italia@faro.it

FARO FRANCE

Za Tgv Coriolis - 71210 Montchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com - farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH

Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933
www.farodeutschland.de - info@farodeutschland.de

Entreprise certifiée




ISO 9001

ISO 13485

INFO LINE:



M92002018_REV01.FRA

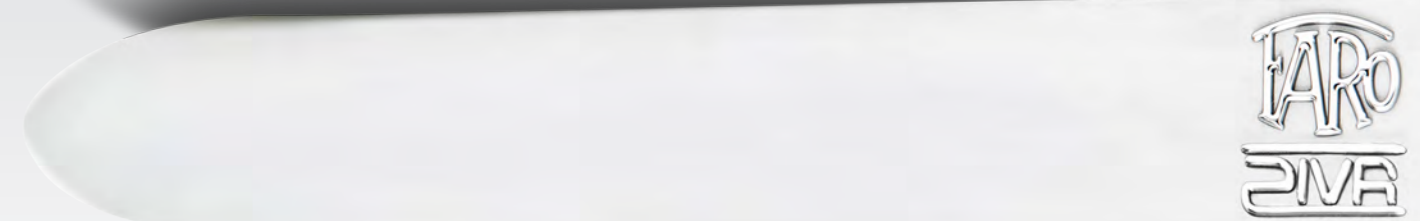

ZIVA
PLAFONNIER LED
DENTAIRE
CE



EXPERIENCE AND INNOVATION
SINCE 1948



ZIVA

PLAFONNIER LED DENTAIRE

LED
TECH

Depuis toujours à la recherche de solutions novatrices et performantes pour l'éclairage des cabinets dentaires, FARO a créé **ZIVA**, la parfaite synthèse entre qualité et essentialité. La sélection attentive et scrupuleuse des matériaux et des composants, tout comme le soin dans les détails, s'unit au family feeling FARO pour créer une parfaite syntonie avec les lampes led opératoires.



LA QUALITÉ À LA PORTÉE DE TOUS

ZIVA est le plafonnier conçu pour satisfaire les exigences opérationnelles et esthétiques du cabinet dentaire. Son **index de rendement chromatique > 90** et à **5.500 K** de température couleur, permet de déterminer véritablement la coloration tout en garantissant une majeure définition des détails. L'emploi de technologies de dernière génération permet un **éclairage homogène et proportionné** du lieu de travail évitant ainsi les zones d'ombre ainsi que le stress et la fatigue visuelle de l'opérateur. **La solution idéale pour ceux qui cherchent un plafonnier avec de hautes prestations à un prix compétitif.**

UTILISATION 2.0

Extrêmement intuitive et facile à employer l'App spéciale compatible avec les systèmes opérationnels iOS et Android permettra à l'opérateur soit de sélectionner le niveau parfait de lumière soit de mémoriser et d'utiliser les scénarios configurés.


Powered by
CASAMBI



CHANGER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

Le **système de fixation magnétique** rend l'installation au plafond extrêmement facile et intuitive tout comme le **"Kit Suspension"** qui permet de convertir facilement **ZIVA** en un plafonnier à suspension.

La **double modalité d'installation** permet de placer **ZIVA** sur **n'importe quel type de plafond** afin de renouveler l'image du cabinet dentaire et en faire un lieu moderne, agréable et élégant où travailler.

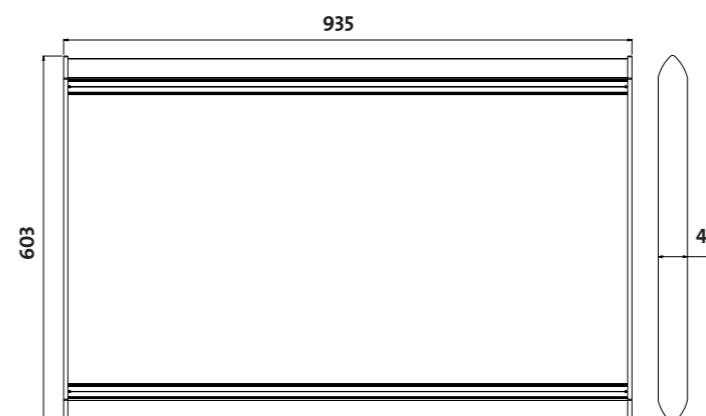

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**	ZIVA
Alimentation	220/240 Va - 50/60 Hz
Puissance	max 240 W
Dimensions	935x603x48 mm
Poids	8 Kg
Éclairage	jusqu'à 3.100 Lux (à la distance de 1.45 m)
Température de Couleur	5.500 K
Rendement Chromatique	> 90

* En option
** (Les données reportées représentent les valeurs typiques sujettes à tolérance)
Produit conforme à la Directive 2015/53/EU