

Power Tower View – Alimentation complète du cabinet sur une surface d'installation minimale.



Power Tower View – Une solution adaptée à chaque exigence

Air comprimé et aspiration combinés sur un seul module.

Le Power Tower View est compact et silencieux et s'intègre facilement dans le cabinet sur une surface de 0,4 m² seulement. Vous gagnez donc un espace précieux par rapport à l'installation d'appareils individuels – un plus, étant donné les prix du mètre carré. Il s'adapte parfaitement à tous les cabinets avec un design élégant et un bruit de fonctionnement très discret. Le choix de son emplacement dans le cabinet est donc libre. Grâce à des options de configuration individuelles, le Power Tower View présente une solution flexible qui évolue avec le cabinet et s'adapte facilement à de nouvelles conditions.



En haut l'air comprimé, en bas l'aspiration

En haut, se trouve le compresseur, le cœur de votre cabinet, puissant et durable qui vous assure avec fiabilité un air comprimé hygiénique, sec et sans huile. En bas se trouvent les systèmes d'aspiration efficaces Dürr Dental en version «sèche» ou «humide» pour le traitement sans interruption, ergonomique et protégé des infections.

Points importants :

- Alimentation complète du cabinet sur une surface d'installation minimale grâce à un design compact, moderne et attrayant s'intégrant parfaitement aux locaux du cabinet
- La sécurité de fonctionnement optimisée grâce aux avertissements précoces et aux rappels de maintenance automatiques (des appareils parfaitement entretenus, élimination rapide des défauts, télémaintenance)
- Une commande de compresseur adaptée aux besoins offre un fonctionnement régulier
- Adaptation des réglages de l'appareil selon les besoins du cabinet dentaire
- Une faible intensité sonore – moins de 54 dB(A) assurée par une isolation phonique performante
- Un appareil adapté pour chaque cabinet grâce à des options de configuration individuelles
- Utilisation pratique et intuitive de l'appareil



Écran et mise en réseau

L'écran tactile en couleur à haute résolution permet une utilisation agréable et l'ajustement simple des réglages de l'appareil aux besoins du cabinet. Tous les systèmes s'intègrent facilement au réseau du cabinet et fournissent via le logiciel des messages d'état, des rappels de maintenance ou des messages d'avertissement. Vous améliorez ainsi la sécurité de fonctionnement du cabinet et garanteez une maintenance toujours parfaite des appareils et un dépannage plus rapide, tout en bénéficiant de la possibilité d'une télémaintenance à distance.




Une solution avec extension possible

Le concept modulaire du Power Tower View offre des possibilités flexibles d'amélioration et de transformation. Vous pouvez par exemple l'équiper d'un groupe compresseur supplémentaire afin d'augmenter la puissance potentielle ou de créer des intervalles d'entretiens réguliers sous contrôle permanent pour une sécurité de fonctionnement maximale.

Un pour tous – Tout en un

Le Power Tower View intègre dans une seule unité compacte le groupe compresseur, le réservoir d'air comprimé, le moteur d'aspiration, le dessiccateur à membranes, et selon les besoins du cabinet, le récupérateur d'amalgame. Ceci tout en respectant les propriétés thermiques et physiques de chaque élément. Le concept modulaire répond à plusieurs souhaits individuels et permet des configurations jusqu'à 4 utilisateurs. Ainsi, une solution adaptée est proposée pour toutes les tailles de cabinet.

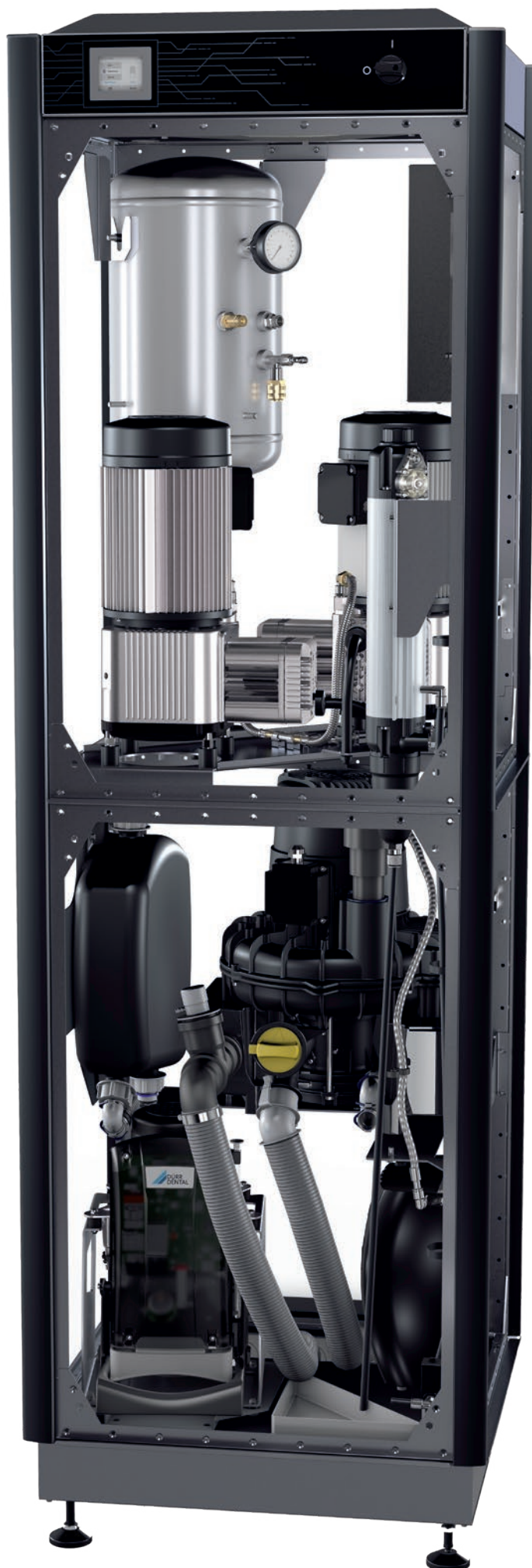


Données techniques en un coup d'œil

Praticiens	Moteur d'aspiration	Compresseur	2ème groupe compresseur en option	Récupérateur d'amalgame en option	Débit à 5 bar (l/min) avec 1 groupe compresseur	Débit à 5 bar (l/min) avec 2 groupes compresseur	Niveau sonore [dB(A)] pour une température ambiante de 35 °C	Tension [V]	Fréquence [Hz]	« Dimensions (H x l x P) [cm] »	Poids [kg]
3	VS 900 S	Duo	Oui	Oui	100	195	53	400	50	208 x 64 x 61	275
4	VS 1200 S	Duo	Oui	Oui	100	195	53	400	50	208 x 64 x 61	275
3	V 900 S	Duo	Oui	Non	100	195	53	400	50	208 x 64 x 61	265
4	V 1200 S	Duo	Oui	Non	100	195	53	400	50	208 x 64 x 61	265

Accessoires

Pour trouver le bon filtre, allez sur la page Web :


<https://www.duerrdental.com/fr/produits/air-comprime/materiel-accessoires/choix-du-filtre/?changeLang=1>

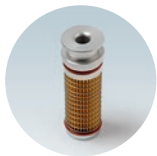

Filtre d'admission pour groupes compresseurs



Filtre bactériologique et virucide pour dessiccateur à membranes

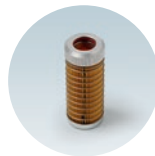

Filtre fin pour dessiccateur à membranes



Filtre conique pour dessiccateur à membranes

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les notices de nos produits.
Produits non remboursés par les organismes de santé.

DÜRR DENTAL FRANCE
71 rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
France
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

DÜRR DENTAL BeNeLux
Molenheidebaan 97
B-3191 Hever
Belgique
www.durr.be
info@durr.be

DÜRR DENTAL SCHWEIZ AG
Grabenackerstr. 27
8156 Oberhasli
Suisse
www.duerrdental.ch
info.ch@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME